
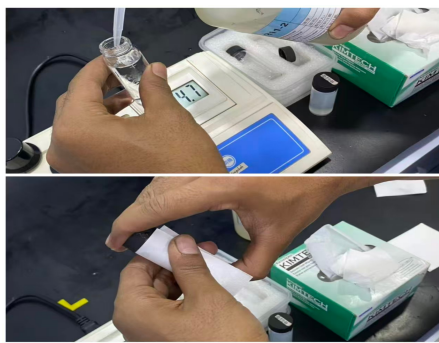
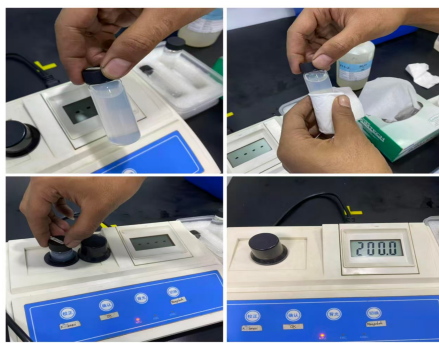


水质浊度测定单点教程					
单位：质检部		区域：化学分析室		岗位：质检员	
编写人：林江	审核人：陈明	批准人：邵松	编号：ZJ-JC-055-V1	更新日期：2026/4/23	
 第一步 准备：比色瓶，擦镜纸，浊度计预热15min	 第二步 清洗：纯水清洗试样瓶并擦拭干净	 第三步 零浊度校准	 第四步 满浊度校准	 第八步 结束：仪器归位，浊度标液放入冰箱冷藏	
 第五步 摇匀水样	 第六步 清洗：水样清洗试样瓶3次	 第七步 测量：放入水样，读取并记录结果			
关键点： 1. 开启仪器电源开关至少预热15min，按切换键选择需要的浊度单位NTU。 2. 样瓶清洗：样瓶必须清洗干净，用不落毛软布擦净水迹和指印，拿取样品瓶只能拿瓶体上部，避免指印进入光路。 3. 零浊度水校准：将零浊度水置入测量池内，试样瓶刻度线对准测量池白色定位线，盖上遮光盖，按校正按键，仪器显示0.00并且闪烁，按确认键，仪器倒计时15秒，零水校正完成进入测量阶段。 4. 满度校正：按二下校正按键，即进入满度校正，放入满度标准液，试样瓶刻度线对准测量池白色定位线，盖上遮光盖，满度值闪烁，按确认键，倒计时15秒，校正完毕仪器自动进入测量阶段。 5. 读数：水样放入测量池，盖上遮光盖进行测量，等显示稳定后再读数（一般在10秒钟后或数值第一次反复跳动时读数）。					


Panduan Titik Tunggal Pengukuran Kekeruhan Air

Departemen: Quality Control		Area: Laboratorium Analisis Kimia		Posisi: Quality Control Staff	
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 陈明	Penyetuju: 邵松	Nomor: ZJ-JC-055-V1	Tanggal Pembaharuan: 2026/4/23	

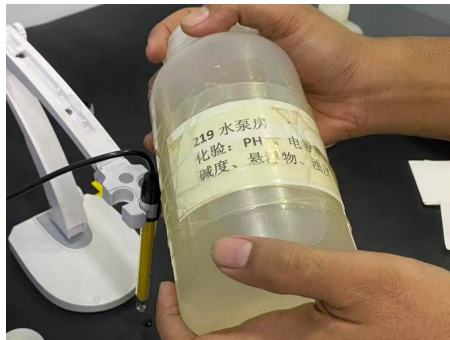

Langkah 1

Persiapan: Siapkan botol sampel, tisu lensa, dan panaskan turbidimeter 15 menit.

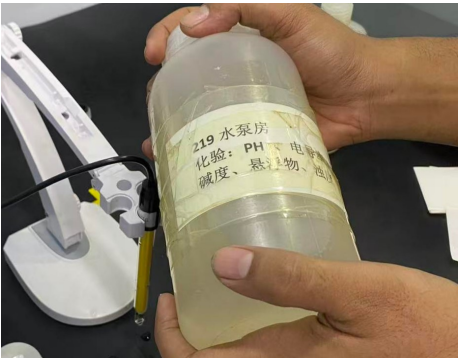

Langkah 5

Homogenkan sampel air.



Langkah 2

Pembersihan: Bilas botol sampel dengan air murni, lalu keringkan.



Langkah 6

Pembilasan: Bilas botol sampel 3 kali menggunakan sampel air.




Langkah 3

Kalibrasi: Lakukan kalibrasi nol



Langkah 7

Pengukuran: Masukkan sampel, ukur, lalu baca dan catat hasil.

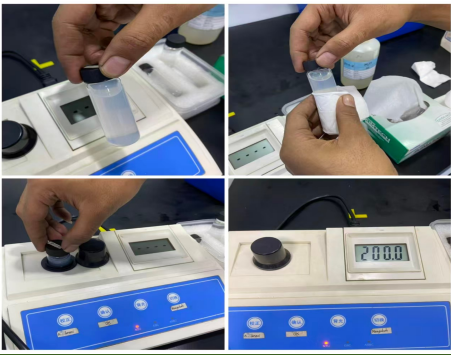

Langkah 4

Kalibrasi: Lakukan kalibrasi skala penuh



Langkah 8

Selesai: Simpan kembali alat dan simpan larutan standar kekeruhan di lemari es.

Poin Penting:

- 1.Nyalakan alat dan panaskan minimal 15 menit, pilih satuan NTU.
- 2.Bersihkan botol sampel, lap hingga kering, pegang bagian atas botol agar jalur optik tidak terkontaminasi sidik jari.
- 3.Kalibrasi nol: Gunakan air nol kekeruhan, sejajarkan tanda botol dengan garis putih, tutup penutup cahaya, lalu lakukan kalibrasi hingga selesai.
- 4.Kalibrasi penuh: Gunakan larutan standar, sejajarkan botol, tutup penutup cahaya, lalu lakukan kalibrasi hingga selesai.
- 5.Pengukuran: Masukkan sampel, tutup penutup cahaya, tunggu tampilan stabil (± 10 detik), kemudian baca dan catat hasil.