

8860光电直读光谱开关机单点教程

单位：质检部

区域：206

岗位：质检员



编写人：杨林

审核人：肖明

批准人：殷永强

编号：ZJ-JC-028-V1 更新日期：2026/5/5



第一步

关主机：非检测状态，关主机后面电源按钮




第二步

关氩气：关闭对应设备氩气阀门



第三步

关辅助设备：1# OES UPS，2# OES 稳压器

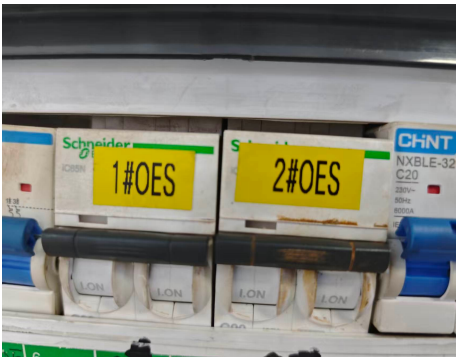

第四步

关软件、电脑和配电箱断路器



第五步

开机：确认主机开关为关闭状态，开配电箱断路器



第六步

开辅助设备；开启断路器，电压正常稳定后按绿色按钮



第七步

开氩气：打开对应设备氩气阀门



第八步

开主机：打开仪器主机电源。最后打开电脑和分析软件

关键点：

1. 上表第1步至第4步为关机操作步骤；第5至第8步为开机操作步骤
2. 辅助设备：1号OES为UPS兼稳压器，开关长按"ON/OFF"即可；2号OES为稳压器，关闭时直接断开断路器，打开时先打开断路器，再按下旁边绿色启动按钮。
3. 开机顺序：必须按氩气-主机-电脑和软件的顺序，因为开主机后自动氩气冲洗管路，软件后启动能自动联机。

Panduan Singkat Startup & Shutdown Spektrometer Emisi Optik 8860 (OES)

Departemenkerja: Quality Control

Area: 206

Posisi: Quality Control Staff



Pemeriksa: 杨林

Pemeriksa: 肖明

Penyetuju: 张志强

Nomor: ZJ-JC-028-V1

Tgl Pembaharuan: 2026/5/5



Tahap 1

Shutdown mesin utama: saat tidak dalam mode analisis, matikan tombol power di belakang mesin utama



Tahap 2

Tutup gas argon: tutup katup argon pada peralatan terkait



Tahap 3

Matikan perangkat pendukung: UPS OES No.1 dan stabilizer OES No.2



Tahap 4

Tutup software, matikan komputer, dan breaker panel listrik



Tahap 5

Startup: pastikan sakelar utama dalam kondisi OFF, lalu nyalakan breaker panel listrik



Tahap 6

Nyalakan perangkat pendukung: hidupkan breaker, setelah tegangan stabil tekan tombol hijau



Tahap7

Nyalakan gas argon: buka katup argon pada peralatan terkait



Tahap 8

Nyalakan mesin utama: hidupkan daya instrumen, lalu terakhir nyalakan komputer dan software analisis

Poin Penting:

- Langkah 1–4 pada tabel di atas merupakan prosedur shutdown, sedangkan langkah 5–8 merupakan prosedur startup.
- Perangkat pendukung: OES No.1 menggunakan UPS sekaligus stabilizer, cukup tekan dan tahan tombol “ON/OFF”. OES No.2 menggunakan stabilizer, saat mematikan cukup putuskan breaker, dan saat menyalakan buka breaker terlebih dahulu lalu tekan tombol hijau start di sampingnya.
- Urutan startup: harus mengikuti urutan gas argon → mesin utama → komputer dan software, karena setelah mesin utama dinyalakan sistem akan otomatis melakukan flushing argon, dan software yang dijalankan terakhir dapat otomatis terkoneksi.