
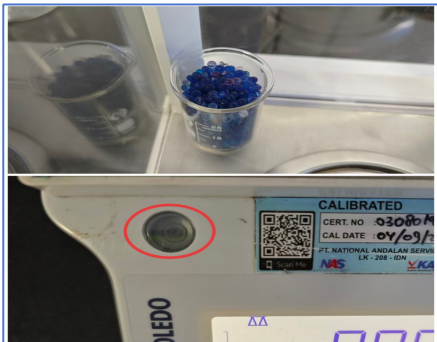
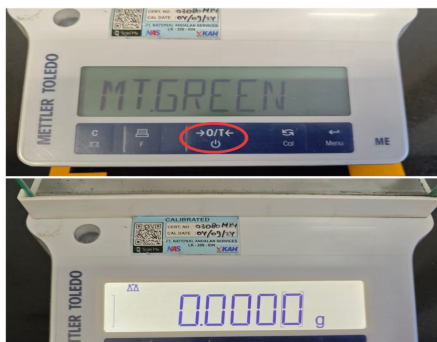
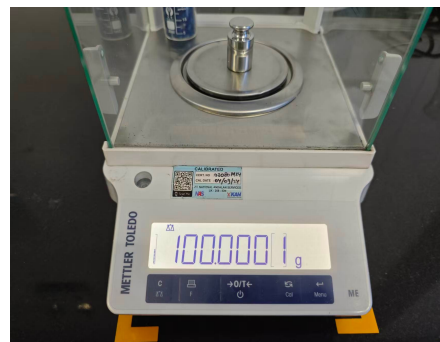
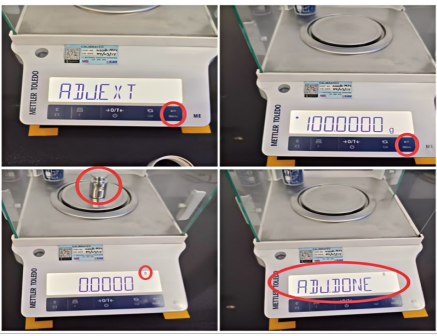
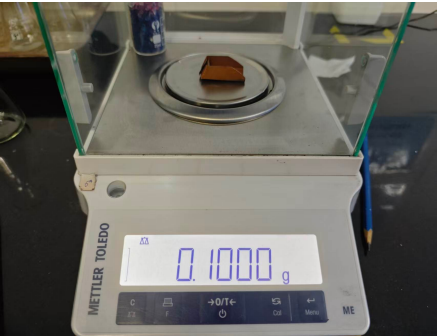


电子天平使用单点教程					
单位：质检部		区域：天平室		岗位：质检员	
编写人：杨林		审核人：肖明		批准人：张永强	
编号：ZJ-JC-040-V2		更新日期：2026/4/17			
 第一步 准备：关闭门窗、空调、查看温湿度  第二步 检查：干燥剂为蓝色，水准泡在中心，秤盘上下无异物  第三步 唤醒：待机显示 MT. GREEN，按电源键显示0.0000g  第四步 砝码检查：正常为 100±0.0002g，否则校准  第五 校准：长按Cal进入校准，校准完成须再次砝码检查  第六步 称样：放入称量皿，按O/T去皮  第七步 读数：关闭玻璃门等数值稳定后记录读数  第八步 结束：称量完毕，清理秤盘，转入待机状态					
关键点： 1、电子天平房间环境温度：20-30℃，湿度：<80%，使用天平时关闭空调、门窗，确保无风、无震动、无温差气流。 2、预热：如果天平刚接通电源，必须开机预热30min以上才可使用；持续接通电源状态，随时可以进行称量。 3、放样：直接轻放至秤盘中央，不能在秤盘上来回移动；对易吸湿样品，取样加样动作要迅速；读数时必须关闭防风玻璃门。 4、校准：长按CAL显示ADJ. EXT，按↵显示100.0000g，长按↵，放100g标准砝码，等显示0，取下砝码，等显示ADJ. DONE完成。 5、其它：爱惜砝码避免磨损，高温样品需冷却至室温再称量，禁止超量程称量，禁止将腐蚀性样品直接放于秤盘。					


Panduan Singkat Penggunaan Timbangan Elektronik

Departemen: Quality Control		Area: Ruang Timbang		Posisi: Quality Control Staff		
Penyusun: 杨利军	Pemeriksa: 周海华	Penyetuju: 张永强	Nomor: ZJ-JC-040-V2	Tgl Pembaharuan: 2026/4/17		

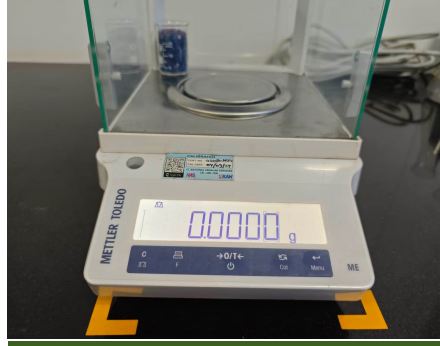

Tahap 1

Persiapan: tutup pintu dan jendela, matikan AC, serta periksa suhu dan kelembapan ruangan

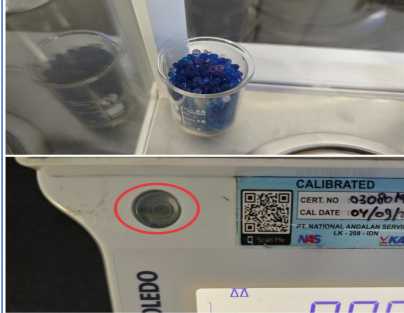


Tahap 2

Pemeriksaan: pastikan waterpass berada di tengah, piringan timbangan bersih dan bebas dari benda asing



Tahap 3

Menyalakan alat: tunggu hingga layar menampilkan “MT.GREEN”, lalu tekan tombol power hingga muncul “0.0000 g”

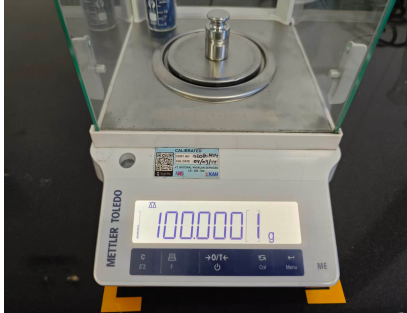

Tahap 4

Pemeriksaan anak timbangan: nilai normal anak timbangan 100 g adalah $\pm 0,0002$ g, jika tidak sesuai maka lakukan kalibrasi




Tahap 5

Kalibrasi: tekan dan tahan tombol CAL untuk masuk ke mode kalibrasi, dan setelah kalibrasi selesai wajib dilakukan pemeriksaan anak timbangan kembali




Tahap 6

Penimbangan: letakkan wadah timbang di tengah piringan, lalu tekan tombol 0/T untuk tare

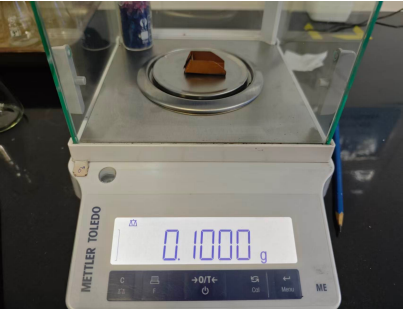

Tahap 7

Pembacaan: tutup pintu kaca pelindung dan catat hasil setelah nilai stabil

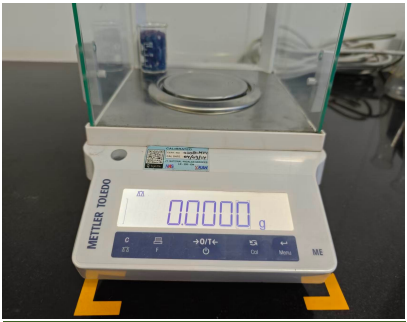

Tahap 8

Selesai: setelah penimbangan selesai, bersihkan piringan timbangan dan kembalikan alat ke kondisi standby

Poin Penting:

- 1、Ruang timbangan elektronik harus memiliki suhu 20–30°C dan kelembapan <80%; saat menggunakan timbangan, AC serta pintu dan jendela harus ditutup untuk memastikan tidak ada angin, getaran, maupun aliran udara akibat perbedaan suhu.
- 2、Jika timbangan baru saja dihubungkan ke sumber listrik, alat harus dipanaskan (preheat) lebih dari 30 menit sebelum digunakan; jika daya tetap tersambung terus-menerus maka penimbangan dapat dilakukan kapan saja.随时可以进行称量。
- 3、Sampel harus diletakkan perlahan tepat di tengah piringan timbangan dan tidak boleh digeser-geser di atas piringan; untuk sampel yang mudah menyerap kelembapan, proses pengambilan dan penambahan sampel harus dilakukan dengan cepat, serta pintu kaca pelindung angin harus ditutup saat pembacaan nilai dilakukan.
- 4、Kalibrasi dilakukan dengan menekan tombol CAL hingga muncul “ADJ.EXT”, kemudian tekan $\leftrightarrow$ hingga tampil “100.0000g”, tekan dan tahan $\leftrightarrow$ lalu letakkan anak timbangan standar 100 g, tunggu hingga tampil “0”, angkat anak timbangan, lalu tunggu hingga muncul “ADJ.DONE” sebagai tanda kalibrasi selesai.
- 5、Anak timbangan standar harus dijaga dengan baik agar tidak aus; sampel bersuhu tinggi harus didinginkan hingga suhu ruang sebelum ditimbang; dilarang melakukan penimbangan melebihi kapasitas alat serta dilarang meletakkan sampel korosif langsung di atas piringan timbangan.