



电子天平维护清理单点教程

单位：质检部		区域：天平室		岗位：质检员		
编写人：杨林	审核人：周明	批准人：张永强	编号：ZJ-JC-076-V1	更新日期：2026/5/13		

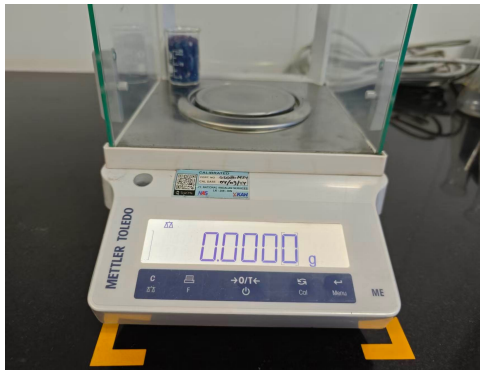


第一步

检查：天平秤盘内外应干净无异物，否则清理

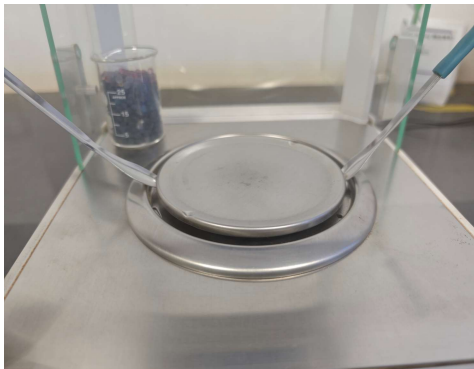

第二步

取下秤盘：用两个称样勺对角水平取出秤样盘

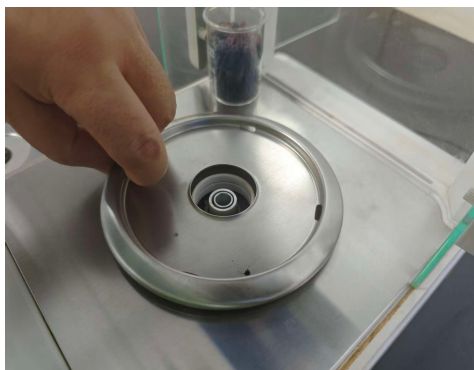


第三步

取下挡风圈：指头夹紧挡风圈孔洞位置取出



第四步

清扫异物：用笔刷轻轻清洁内部粉尘和异物

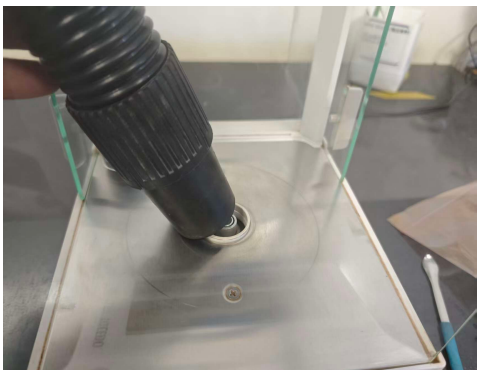

第五步

吸尘：如果天平内部有异物可用吸尘器吸出



第六步

清洁：清洁秤盘和挡风圈，对粘性物可用软布蘸乙醇擦拭



第七步

复位：清洁完毕，装回挡风圈和秤盘



第八步


检查：水准泡必须在中心，干燥剂无失效变红

关键点：

- 取下秤盘：必须对角水平向上取出，不可单侧用力取出，避免将秤盘损坏。
- 清扫灰尘：应非常小心，避免使灰尘落入天平内部。
- 放回秤盘：必须水平对准锥孔轻轻放入，不可用力下压。


Panduan Singkat Perawatan dan Pembersihan Timbangan Elektronik

Departemen: Quality Control		Area: Ruang Timbang		Posisi: Quality Control		
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 肖明	Penyetuju: 廖永强	Nomor: ZJ-JC-076-V1	Tgl Pembaharuan: 2026/5/13		

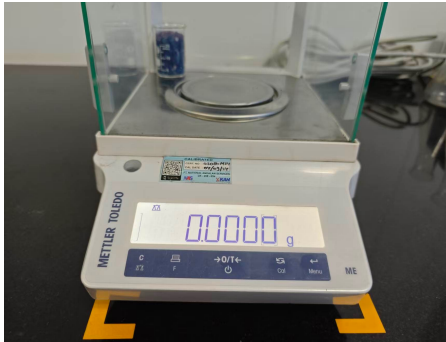


Tahap 1

Pemeriksaan: pastikan bagian dalam dan luar piringan timbangan bersih serta bebas dari benda asing, jika tidak maka harus dibersihkan

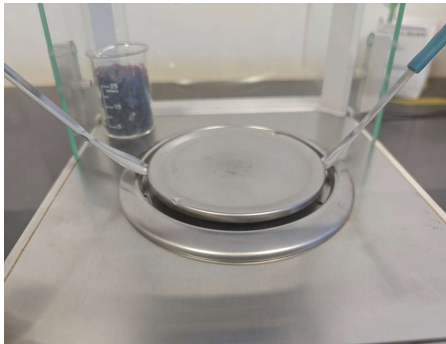


Tahap 2

Melepas piringan timbangan: gunakan kedua tangan untuk mengangkat secara horizontal pada posisi diagonal

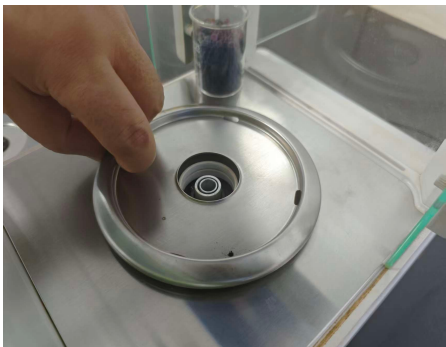


Tahap 3

Melepas ring pelindung angin: jepit lubang ring pelindung menggunakan jari lalu angkat keluar

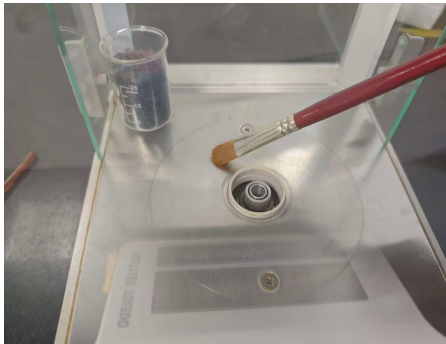

Tahap 4

Pembersihan: gunakan kuas untuk membersihkan debu dan kotoran di bagian dalam secara perlahan

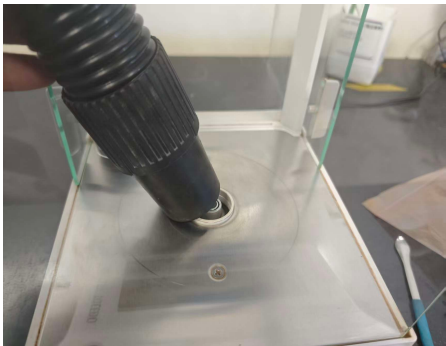


Tahap 5

Penyedotan debu: jika terdapat benda asing di dalam timbangan, gunakan alat penyedot debu untuk membersihkannya




Tahap 6

Pembersihan: bersihkan piringan timbangan dan ring pelindung angin; untuk noda lengket dapat dilap menggunakan kain bebas debu yang dibasahi etanol

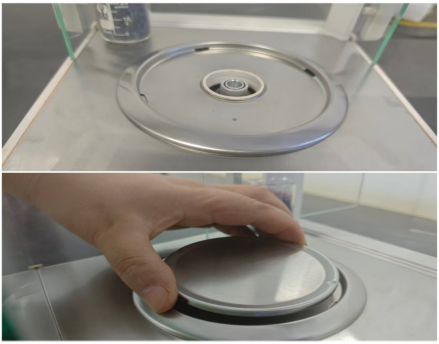

Tahap 7

Pemasangan kembali: setelah pembersihan selesai, pasang kembali ring pelindung angin dan piringan timbangan

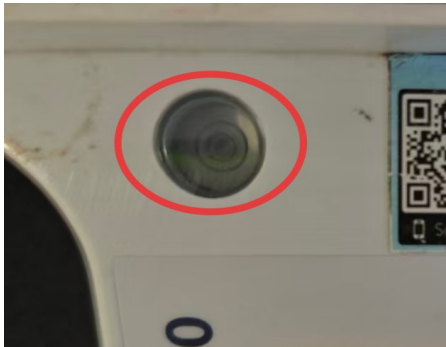

Tahap 8

Pemeriksaan: pastikan waterpass berada di tengah, kondisi bersih, dan tidak terdapat perubahan nilai yang abnormal

Poin Penting:

- 1.Saat melepas piringan timbangan, angkat secara horizontal dan seimbang dari kedua sisi diagonal; dilarang menarik hanya dari satu sisi agar piringan timbangan tidak rusak.
- 2.Saat membersihkan debu, lakukan dengan sangat hati-hati agar debu tidak masuk ke bagian dalam timbangan.
- 3.Saat memasang kembali piringan timbangan, posisikan secara horizontal dan sejajarkan dengan lubang kerucut sebelum diletakkan perlahan; dilarang menekan dengan kuat.